

▲ 概述

SLJ-1000螺旋机架专为SH、SP(外置式)系列推拉力计配备,适用于各行业和科研机构作拉压负荷、插拔力、破坏试验等测试。机架采用梯形螺形螺杆传动,整体式螺母设计;具备手动操作、简单稳定、立卧两用等特点。


- 外形尺寸: L154×W240×H517 mm;
- 额定负荷: 1000N; 行程: 200mm;
- 标准配置(需另购): SH、SP(外置式) 选购配置(需另购): SKN 系列推拉力计; 各种工装夹具。

2 外形结构 SLJ-1000螺旋机架(SKN-1) SLJ-1000螺旋机架(SH/SP-1K) 注: 图中推拉力计、夹具需另购。 SLJ-1000螺旋机架标配安装推拉力计背板 (SH/SP-1K); 配置SKN测力计,下单前需

要联系销售定制。


3 机架安装方法

1、将机架安放水平的工作台上使用, 利用7枚调节螺钉,使机架保持水 平,以保证测试时得到准确的数 值。也可利用底板上的螺孔和安装 孔,将机架安装在工作台上,使机 架更加稳固。工作时可根据测试实 际需要,安装机架。

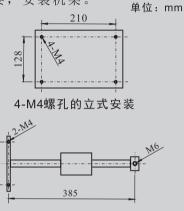

底板侧面2-M4和横梁上M6卧式安装

2、外形结构示意图。

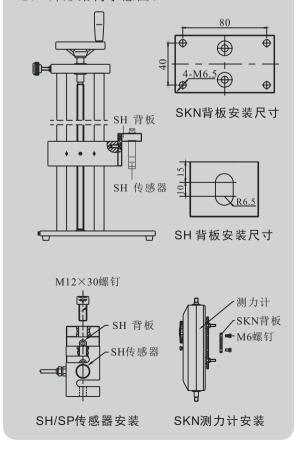





⁴ - 测试

> 本机架可进行拉、压两个方向的测试工作。根据所需测试的样品特点,将 其安放或安装在机架工作台的合适位置 上。调整高度,转动机架上方的手轮, 下压或上升完成测试。

5 注意事项

- 1、SLJ-1000机架额定负荷1000N, 其最大位移为200mm。切勿超负荷使用,否则会损坏机架, 更有可能会造成危险:
- 2、 在使用和搬运过程中要轻拿轻放:
- 3、 请勿在水、油或其他液体溅到的地 方使用本机架;
- 4、请用柔软的布来清洁本机,将干布 浸入泡有清洁剂的水中,拧干后再 清除灰尘和污垢。不要使用易散发 的化学物质,例如挥发油、稀释剂、 酒精等:
- 5、不要自行拆卸,修理或改造本机架, 这些行为可能引起机架永久性故障。

- 3、本产品自销售之日起一年内,在正常使用情况下,出现非人为故障属保修范围(用户自行拆机或在其他维修点维修本公司不予保修),客户凭销售发票原件和有效保修卡联系原购买处,可获本公司免费保修一年:
- 4、本产品的保修条款仅适用于在中国市场上销售的SLJ-1000产品,对超过包换期及保修期限的产品,客户可向原购买处咨询维修事宜或与本公司联系,由本公司提供有偿维修。

7

包装清单

编号	名称	数量
1	机架	1
2	M12×30螺钉	1
3	使用说明书	1
4	合格证、保修卡	1

❶ 维修说明

- 1、 发生故障请与原购买处或本公司联系:
- 2、本产品自销售之日起一个月内,在 正常使用及外观无破损情况下出现 质量问题,客户凭销售发票原件、 有效保修卡及完整包装到原购买处 或本公司更换相同规格型号的产品, 更换以后的产品延续原产品的保修 期限和条款;

制造商: 温州山度仪器有限公司

地址:浙江省温州市龙湾区西台工业区西工西路5号

邮编: 325011

TEL: 400 826 0705

FAX: +86 577 88390155 Http://www.sundoo.com E-mail:sundoo@sundoo.com

Ver: 1.01 Con:20220322